





## MÉTHODE ALTERNATIVE : TRANSBORDEMENT SANS TABLE DE TRANSBORDEMENT - CHALLENGER


### MÉTHODE 1 – EMBARQUEMENT

ROTATION DE LA STRYKER : LE PATIENT DOIT ÊTRE POSITIONNÉ SUR UNE FERNO OU UNE TOILE MEGAMOVER AVANT LE DÉBUT DE LA MANOEUVRE


TÂCHES PARAMÉDICS		TÂCHES EVAQ
<ul style="list-style-type: none"> <li>ÉLOIGNER LA STRYKER DU VÉHICULE AMBULANCIER ET DE L'AVION</li> <li>SE POSITIONNER DE CHAQUE CÔTÉ DE LA FERNO OU MEGAMOVER EN LAISSANT LA TÊTE LIBRE</li> <li>DÉTACHER LE PATIENT DE LA STRYKER</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>DÉSIGNER UN MEMBRE DE L'ÉQUIPE QUI PROCÈDERA À LA ROTATION DE LA STRYKER</li> <li>UN MINIMUM DE DEUX MEMBRES DE L'ÉQUIPE SE POSITIONNE DE CHAQUE CÔTÉ DE LA FERNO OU DE LA MEGAMOVER EN LAISSANT LA TÊTE LIBRE</li> <li>DÉTACHER LE PATIENT DE LA STRYKER</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>SOULEVER LE PATIENT ET LES ÉQUIPEMENTS DE MANIÈRE STATIQUE</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>SOULEVER LE PATIENT ET LES ÉQUIPEMENTS DE MANIÈRE STATIQUE</li> <li>TIRER COMPLÈTEMENT LA CIVIÈRE STRYKER PAR L'ESPACE DE TÊTE, EFFECTUE UNE ROTATION DE 180° DE LA STRYKER ET LA REPOSITIONNE EN DESSOUS DU PATIENT</li> </ul>

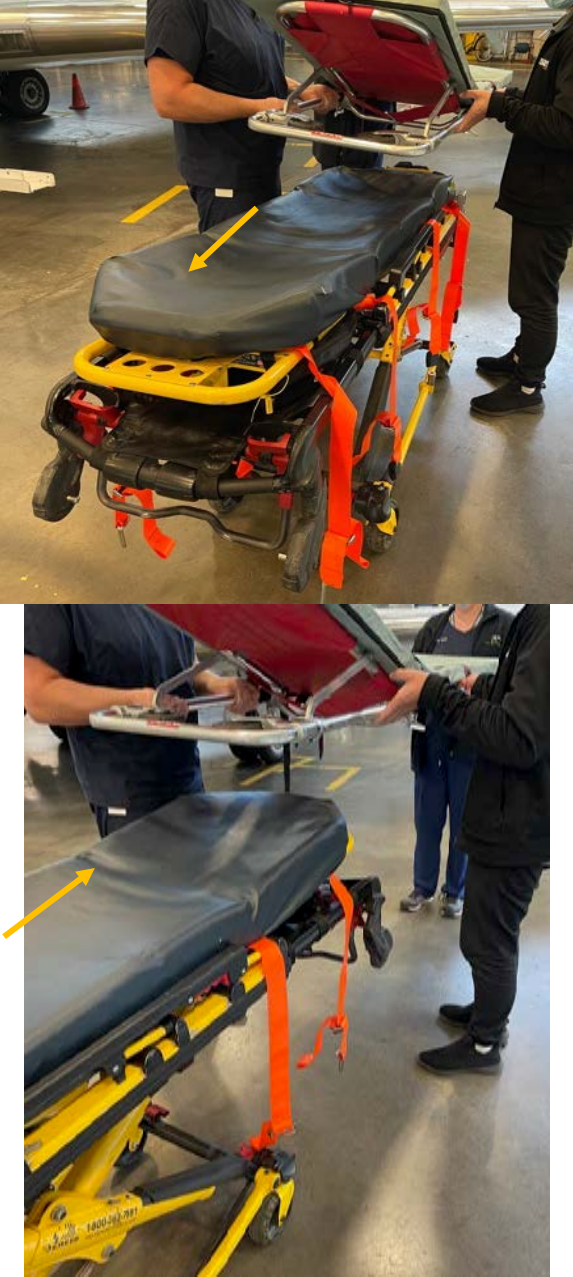

		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATTACHER LE PATIENT SUR LA STRYKER</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATTACHER LE PATIENT SUR LA STRYKER</li> <li>• LE PILOTE S'ASSURE QUE LE TRÉPIED EST INSTALLÉ SOUS LES RAMPES</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• LES PARAMÉDICS POSITIONNENT LA STRYKER EN PRÉVISION DE L'EMBARQUEMENT.</li> <li>• LES PARAMÉDICS SE</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• LE PERSONNEL D'EVAQ SE POSITIONNE À PROXIMITÉ DES RAMPES</li> </ul>



<p>POSITIONNENT AU PIED DE LA CIVIÈRE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ÉLEVER LA STRYKER À LA POSITION LA PLUS HAUTE</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>PROCÉDER À L'EMBARQUEMENT PIEDS DEVANT AVEC LES ROUES NOIRES DE LA STRYKER SUR LES RAMPES</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>SOULEVER LES ROUES DE TÊTE (NOIRES) ET LES APPUYER SUR LES RAMPES</li> <li>INSTALLER LES SANGLES DE RETENUE SUR LES RAMPES</li> </ul>
<p><b>MÉTHODE 1 – DÉBARQUEMENT</b> ROTATION DE LA STRYKER</p>		
<p><b>TÂCHES PARAMÉDICS</b></p>		<p><b>TÂCHES EVAQ</b></p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>LE PILOTE S'ASSURE QUE LE TRÉPIED EST INSTALLÉ SOUS LES RAMPES</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>TRANSBORDER LA STRYKER DANS L'AVION EN ENTRANT LA</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>INSTALLER LES SANGLES DE RETENUE SUR LES RAMPES</li> </ul>

<p>CIVIÈRE AVEC LES ROUES DE TÊTE (NOIRES) EN PREMIER</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• COLLABORER AU TRANSFERT DU PATIENT SUR LA STRYKER EN AJOUTANT UNE FERNO OU UNE TOILE MEGAMOVER</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• TRANSFÉRER LE PATIENT SUR LA STRYKER EN AJOUTANT UNE FERNO OU UNE TOILE MEGAMOVER</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DÉBARQUER DE L'AVION AVANT LA STRYKER ET AIDER À LA POSITIONNER SUR LES RAMPES</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• INSTALLER LES SANGLES DE RETENUE SUR LES RAMPES</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROCÉDER AU DÉBARQUEMENT DE LA STRYKER</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• RETIRER LES SANGLES DE RETENUE</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SE POSITIONNER DE CHAQUE CÔTÉ DE LA FERNO OU MEGAMOVER EN LAISSANT LA TÊTE LIBRE</li> <li>• DÉTACHER LE PATIENT DE LA STRYKER</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• UN MINIMUM DE DEUX MEMBRES DE L'ÉQUIPE SE POSITIONNE DE CHAQUE CÔTÉ DE LA FERNO OU DE LA MEGAMOVER EN LAISSANT LA TÊTE LIBRE</li> <li>• DÉTACHER LE PATIENT DE LA STRYKER</li> </ul>





<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOULEVER LE PATIENT ET LES ÉQUIPEMENTS DE MANIÈRE STATIQUE</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOULEVER LE PATIENT ET LES ÉQUIPEMENTS DE MANIÈRE STATIQUE</li> <li>• TIRER COMPLÈTEMENT LA CIVIÈRE STRYKER PAR L'ESPACE DE TÊTE, EFFECTUE UNE ROTATION DE 180° DE LA STRYKER ET LA REPOSITIONNE EN DESSOUS DU PATIENT</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATTACHER LE PATIENT SUR LA STRYKER</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATTACHER LE PATIENT SUR LA STRYKER</li> </ul>
<b>MÉTHODE 2 – EMBARQUEMENT</b> <b>TRANSFERT SUR UNE DEUXIÈME STRYKER</b>		
<b>TÂCHES PARAMÉDICS</b>		<b>TÂCHES EVAQ</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• POSITIONNER LES DEUX STRYKER CÔTE À CÔTE EN INVERSANT LA TÊTE ET LE PIED</li> <li>• DÉTACHER LE PATIENT DE LA STRYKER</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• DÉTACHER LE PATIENT DE LA STRYKER</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• TRANSFÉRER LE PATIENT ET LES ÉQUIPEMENTS SUR LA DEUXIÈME STRYKER</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• TRANSFÉRER LE PATIENT ET LES ÉQUIPEMENTS SUR LA DEUXIÈME STRYKER</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATTACHER LE PATIENT SUR LA STRYKER</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATTACHER LE PATIENT SUR LA STRYKER</li> <li>• LE PILOTE S'ASSURE QUE LE TRÉPIED EST INSTALLÉ SOUS LES RAMPES</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• LES PARAMÉDICS POSITIONNENT LA STRYKER EN PRÉVISION DE L'EMBARQUEMENT.</li> <li>• ÉLEVER LA STRYKER À LA POSITION LA PLUS HAUTE</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• LE PERSONNEL D'EVAQ SE POSITIONNE À PROXIMITÉ DES RAMPES</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROCÉDER À L'EMBARQUEMENT PIEDS DEVANT AVEC LES ROUES NOIRES DE LA STRYKER SUR LES RAMPES</li> </ul>	 <p style="background-color: red; color: black; text-align: center; font-weight: bold;">LE TRÉPIED EST ABSENT DES PHOTOS, MAIS IL DEVRAIT ÊTRE PRÉSENT.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOULEVER LES ROUES DE TÊTE (NOIRES) ET LES APPUYER SUR LES RAMPES</li> <li>• INSTALLER LES SANGLES DE RETENUE SUR LES RAMPES</li> </ul>
<p><b>MÉTHODE 2 – DÉBARQUEMENT</b> TRANSFERT SUR UNE DEUXIÈME STRYKER</p>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• LE PILOTE S'ASSURE QUE LE TRÉPIED EST INSTALLÉ SOUS LES RAMPES</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• TRANSBORDER LA STRYKER DANS L'AVION EN ENTRANT LA CIVIÈRE AVEC LES ROUES DE TÊTE (NOIRES) EN PREMIER</li> </ul>	 <p style="background-color: red; color: black; text-align: center; font-weight: bold;">LE TRÉPIED EST ABSENT DES PHOTOS, MAIS IL DEVRAIT ÊTRE PRÉSENT.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INSTALLER LES SANGLES DE RETENUE SUR LES RAMPES</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• COLLABORER AU TRANSFERT DU PATIENT SUR LA STRYKER</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• TRANSFÉRER LE PATIENT SUR LA STRYKER</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DÉBARQUER DE L'AVION AVANT LA STRYKER ET AIDER À LA</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• INSTALLER LES SANGLES DE RETENUE SUR LES RAMPES</li> </ul>



<p>POSITIONNER SUR LES RAMPES</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROCÉDER AU DÉBARQUEMENT DE LA STRYKER</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• RETIRER LES SANGLES DE RETENUE</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• POSITIONNER LES DEUX STRYKER CÔTE À CÔTE EN INVERSANT LA TÊTE ET LE PIED</li> <li>• DÉTACHER LE PATIENT DE LA STRYKER</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• DÉTACHER LE PATIENT DE LA STRYKER</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"><li>• TRANSFÉRER LE PATIENT ET LES ÉQUIPEMENTS SUR LA DEUXIÈME STRYKER</li></ul>	 A photograph showing a patient lying on a stretcher. The patient is wearing dark clothing and has their face obscured by a black circle. The stretcher is yellow and black, with orange straps visible. The patient is being transferred from one stretcher to another, as indicated by the text in the adjacent cells.	<ul style="list-style-type: none"><li>• TRANSFÉRER LE PATIENT ET LES ÉQUIPEMENTS SUR LA DEUXIÈME STRYKER</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• ATTACHER LE PATIENT SUR LA STRYKER</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• ATTACHER LE PATIENT SUR LA STRYKER</li></ul>